

PIILOSET®

THE BEST FOR YOUR EYES SINCE 1978
35
YEARS

**PRODUS BIOLOGIC
EFICIENT, SIGUR
ȘI PRIETENOS
CU MEDIUL**

**COMPATIBIL
CU LENTILELE
SILICON HIDROGEL**

Produs disponibil
și în farmacii

Pentru ochi sensibili sau iritați

Performanță Antimicrobiană Dovedită

Produsul a fost dezvoltat și cercetat în Finlanda de firma Finnsusp Oy în colaborare cu microbiologi și medici oftalmologi și este aprobat de Federația Finlandeză de Alergie și Astm. Produsul nu conține ingrediente care pot cauza iritații și nu a fost testat pe animale.



BioSoak ALL-IN-ONE
Soluție universală
pentru întreținerea,
dezinfecția și depozitarea
lentilelor de contact moi






BIO SOAK® ALL-IN-ONE

BioSoak® este o soluție multifuncțională pentru îngrijirea, eliminarea proteinelor, curățarea, dezinfectarea, clătirea și stocarea lentilelor de contact moi. Componentele principale ale BioSoak® sunt detergent biologic, biguanide și disodiu EDTA. PH-ul și osmolaritatea soluției a fost setată la un nivel potrivit pentru ochi. BioSoak a fost dezvoltată de Finnsusp AB Finlanda în colaborare cu microbiologi și oftalmologi, fiind rezultatul unor cercetări și dezvoltări la cel mai înalt standard. Compatibilitatea BioSoak® cu diferite lentile de contact a fost studiată mai mulți ani prin investigații și studii realizate de Spitalul Central Universitar din Turku, Finlanda împreună cu studii fizice de compatibilitate in vitro realizate de Universitatea de Științe Aplicate din Turku, Finlanda. BioSoak® a fost testat pe toate grupurile de lentile din grupul FDA (de la I la IV) și pe diferite lentile din hidrogel stabilindu-se compatibilitatea lui atât în laborator cât și în investigații clinice.

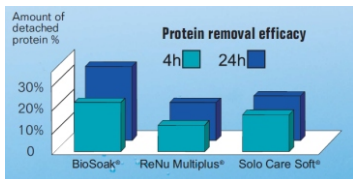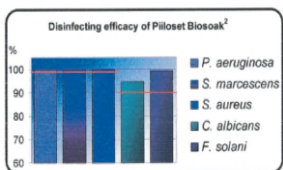

Tabelul Alergiilor din Finlanda.

BioSoak® are dreptul să folosească Tabelul Alergiilor elaborat de Federația Finlandeză pentru Alergii și Astm. Produsul care este compatibil cu tabelul alergiilor nu conține parfumuri sau ingrediente care generează în mod frecvent iritații datorită sensibilității. BioSoak® este unicul produs care are dreptul de a folosi Tabelul Alergiilor. Produsul nu a fost testat pe animale.

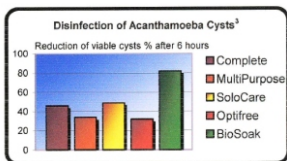

Performanța antimicrobiană dovedită.

Agentul dezinfecant Biguanide al soluției BioSoak® are un efect extins asupra majorității microbilor care produc inflamații ale ochiului (de ex. Valori D pentru *Pseudomonas Aeruginosa* <30, *Serratia marcescens* <30 și *Streptococcus epidermis* <40)¹. Efectul agentului Biguanide este susținut de un detergent biologic care îndepărtează reziduurile de pe suprafața lentilei de contact și produce o dezinfectare foarte eficientă.

Eficacitatea dezinfectării cu BioSoak® respectă Standardul Internațional EN ISO 14729 în conformitate cu timpul de dezinfectare recomandat². Într-un studiu oftalmologic efectuat la validarea clinică nu au fost raportate efecte secundare și BioSoak® a confirmat că este extrem de blând cu ochii fiind potrivit pentru toate tipurile de ochi sensibili.

Componente cheie.

Biguanide este un dezinfectant care curăță lentila de contact și protejează soluția de contaminare microbiologică. Detergentul este biologic biodegradabil, curățând substanțele și îndepărtând impuritățile de pe suprafața lentilei de contact, îmbunătățind acțiunea dezinfectantului. EDTA îmbunătățește dezinfectarea și îndepărtează depozitele calcificate formând compuși Ca-EDTA. Boratul de sodiu stabilizează PH-ul soluției la un nivel potrivit pentru ochi. Clorura de sodiu ajustează osmolaritatea soluției echivalentă cu cea a fluidului lacrimal.

¹Data on file Finnsusp.

²Data on file Finnsusp. Cerințele ISO 14729 sunt reducerea minimă 99,9% în cazul unor bacterii (*P. Aeruginosa*, *S. Aureus*, *S. Marcescens*) și reducerea minimă 90% în cazul mușchiului și drojdiilor (*C. Albicans*, *F. So/ani*) în timpul de dezinfectare recomandat de 4 ore.

³Lehtonen, O.P., Vaahtoranta-Lehtonen, H., Shokriehzadeh, S., Disinfection of Acanthamoeba Cysts by Contact Lens Care Solutions. Turku University Hospital, 1995

Importator și distribuitor în România:

